



MODE D'EMPLOI

Suivre scrupuleusement les instructions pour obtenir un résultat précis. Ne pas manger ou boire pendant 15 minutes minimum avant le test, ni utiliser de produits d'hygiène buccale au cours des 30 minutes précédant le test.

AVERTISSEMENT : Si vous êtes sous traitement contre le VIH (ARV), vous pourriez obtenir un résultat erroné.



CONSULTER LES INSTRUCTIONS

www.oraquickhivselftest.com

FRENCH / COTE D'IVOIRE



ORAQUICK
AUTOTEST DU VIH

COMMENT UTILISER LA TROUSSE ORAQUICK® HIV SELF-TEST KIT



1

VOUS AUREZ BESOIN D'UN MOYEN POUR CHRONOMÉTRER LE TEST



2

La pochette contient : **kit de test, support de test et mode d'emploi.**




3

Votre trousse de test contient deux sachets.



4

Ouvrir le sachet contenant le tube.

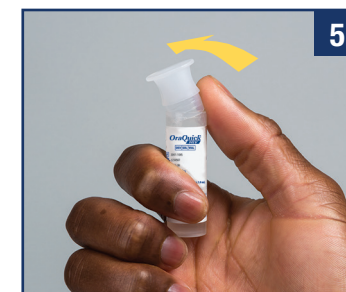

5

Enlever le bouchon.



6

NE PAS renverser le liquide. NE PAS boire.




7

Placer le tube dans le support.



8

Ouvrir la pochette contenant le **dispositif de test** et sortir celui-ci. **NE PAS** toucher la languette plate avec les doigts. **NE PAS** manger ou avaler le conservateur.

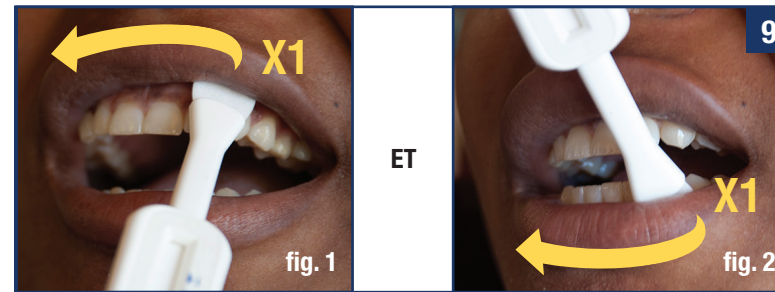


9

Passer la spatule **une fois** sur les **gencives supérieure** (fig. 1) et **inférieure** (fig. 2), en appuyant fermement.



10

Insérer la spatule dans le tube jusqu'à ce qu'elle touche le fond.

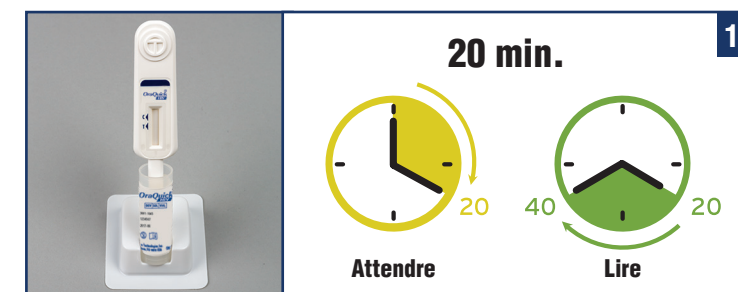


11

L'Y LAISSER pendant 20 MINUTES avant de lire le résultat. NE PAS lire le résultat après 40 minutes.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS Lire les résultats des tests dans une zone bien éclairée

RÉSULTAT SÉROPOSITIF

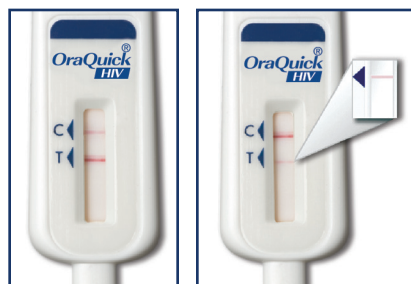

La présence de deux traits complets, même à peine visibles, signifie que vous êtes peut-être **SÉROPOSITIF** et avez besoin de tests supplémentaires.



Le plus vite possible...

Se rendre dans l'établissement de santé ou le centre de test de dépistage du VIH le plus proche

RÉSULTAT NON VALIDE



Pas de trait près du « C » (même s'il y a un trait près du « T »), ou un fond rouge qui obscurcit le test indiquent que le test ne marche pas et doit être refait.

L'utilisateur doit se procurer un autre test.



Le test n'a pas fonctionné correctement. Visitez votre centre le plus proche de dépistage du VIH ou un établissement de santé pour faire le test à nouveau.

RÉSULTAT SÉRONÉGATIF

LORSQU'IL EST LU AVANT 20 MINUTES, LE RÉSULTAT PEUT NE PAS ÊTRE EXACT



UN TRAIT près du « C » et PAS de trait près du « T » indiquent une **SÉRONÉGATIVITÉ**.

Faire régulièrement le test. En cas de risque d'exposition au VIH, refaire le test dans 3 mois.

PAS SÛR DU RÉSULTAT

Vous ne connaissez pas votre résultat ou vous n'êtes pas sûr de votre résultat.

Visitez votre centre le plus proche de dépistage du VIH ou un établissement de santé pour faire le test à nouveau

ÉLIMINATION

Enlever le dispositif de test, remettre le bouchon sur le tube et jeter le tout dans une poubelle normale.

